

ACCESSOIRES



OXYGENOTHERAPIE ACCESSOIRES



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**

HUMIDIFICATEURS

L'humidificateur sert à humidifier l'Oxygène ou l'AIR médical administré au patient par voies respiratoires. Il se visse à la sortie d'un débitmètre (à bille ou bien précalibré) et s'utilise avec de l'eau stérile.

Principales caractéristiques techniques :

Dispositif médical actif de classe IIa.

Conformes à la norme NF EN ISO 8185 : 2007.

- Bocal en polycarbonate, incassable.
- Tétine de sortie moulée dans la masse du couvercle, procurant ainsi une grande solidité de l'ensemble.
- Equipés d'un diffuseur poreux particulièrement silencieux pour le confort du patient.
- Humidificateurs réutilisables.
- Plus économiques d'utilisation que les humidificateurs à usage unique.

Déclinaisons possibles :

• Modèle CCO

Capacité : 250 cc

Autoclavable à 121°C ou stérilisable à froid

Filetages d'entrée :

12x125 F – 9/16" F – 1/2" BS M – 1/4 G F

Hauteur : 190 mm

Diamètre : 45 mm

Poids total : 85 g

Poids total avec eau stérile : 245 g



Humidificateur CCO.
OT16581 : Entrée 12x125 F
OT16580 : Entrée 9/16" F

• Modèle TMS

Capacité : 500 cc

Autoclavable à 134°C

Filetages d'entrée :

12x125 F – 9/16" F – 1/2" BS M – 1/4 G F

Hauteur : 200 mm

Diamètre : 70 mm

Poids total : 155 g

Poids total avec eau stérile : 430 g

Utilisation et Entretien :

Le flacon de l'humidificateur doit être rempli uniquement d'eau stérile.

Le diffuseur doit être changé à chaque patient et à chaque nettoyage du dispositif médical.


Consommables :

- Sachet de 10 diffuseurs, réf. 11557



Humidificateur TMS.
OT16575 : Entrée 12x125 F
OT16574 : Entrée 9/16" F

Couvercle CCO complet 12x125 F OT11558
9/16" F OT11564
Couvercle TMS complet 12x125 F OT11569
9/16" F OT11571

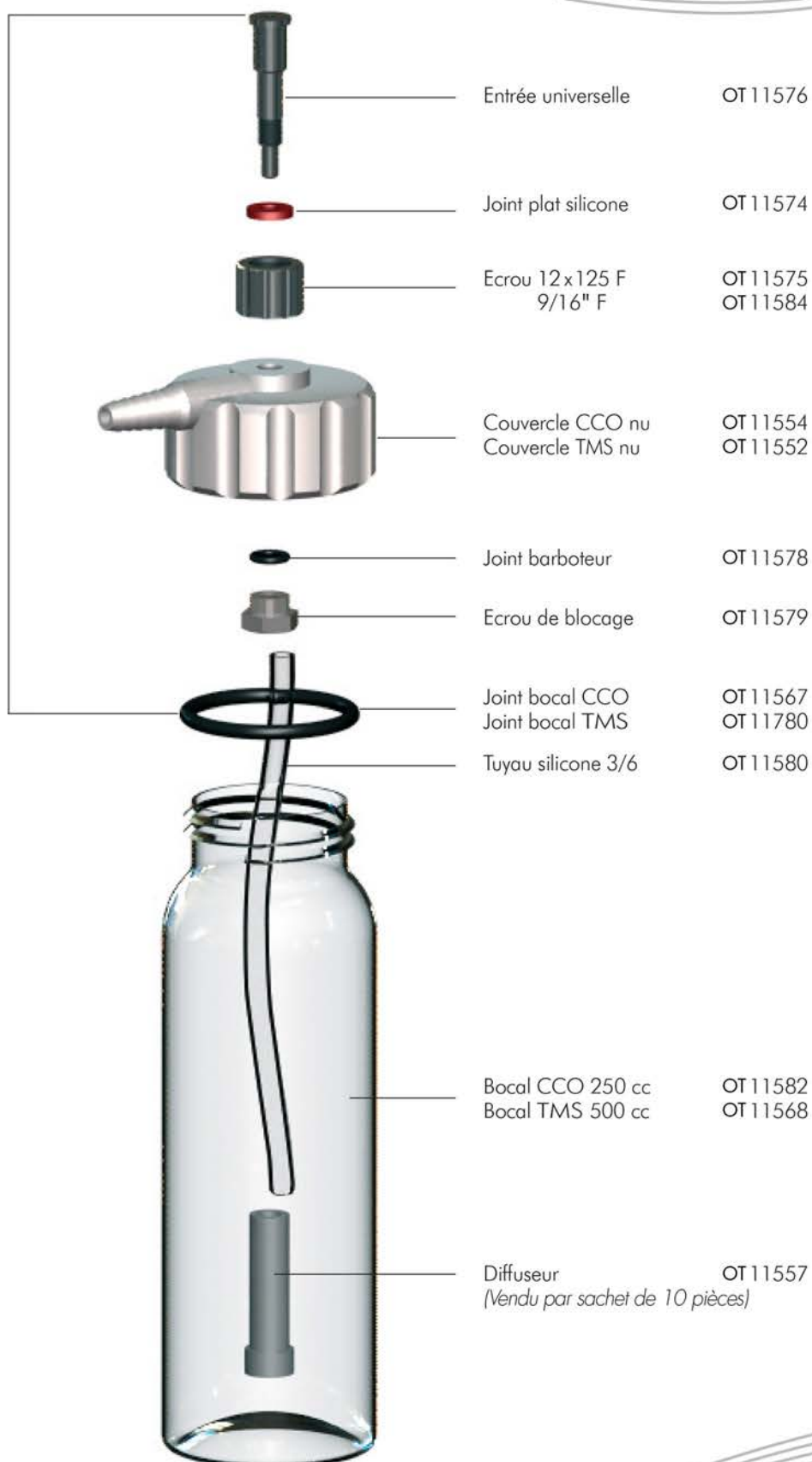

Sangle de fixation

OT11923 : Sangle de fixation seule

OT11924 : Sangle de fixation avec tuyau et olive 12x125 M pour relier l'humidificateur au détendeur-débitmètre de la bouteille.

Humidificateur à commander séparément.



Tétine et olive de sortie pour débitmètres :

a Tétine de sortie, en métal, modèle 2 pièces.
Permet de visser la tétine sans faire tourner le tuyau.

OT11540 : 12x125 F

OT11542 : 9/16" F

b Olive de sortie, en métal, modèle 1 pièce.

OT11537 : 12x125 F

OT11535 : 9/16" F

Flow-Switch ou Switch TM

Le Flow-Switch et le Switch TM se visser sur tout débitmètre classique. Ils permettent de diriger le gaz soit vers une sortie tétine, soit vers un humidificateur. L'utilisateur choisit la position de sortie souhaitée et n'a plus besoin de monter ou démonter la tétine ou l'humidificateur. Le personnel hospitalier gagne ainsi en temps de manipulation et évite le risque d'égarer la tétine.

a Le Flow-Switch : modèle à bague.

OT11616 : entrée et sortie 12x125

OT11617 : entrée et sortie 9/16"

b Le Switch : modèle à robinet.

OT11600 : entrée et sortie 12x125 et 9/16"

OT11601 : Kit 9/16" pour Switch



Raccords intermédiaires 12x125 F - 9/16" M

Pour connecter un débitmètre avec sortie 12x125 M à un humidificateur ou un nébuliseur avec entrée 9/16" F.

a OT16586 : modèle en plastique bleu.

b OT16590 : modèle en métal.

Egalement disponible en 9/16" F - 12x125 M pour connecter un débitmètre avec sortie 9/16" M à un humidificateur ou nébuliseur avec entrée 12x125 F.

FLEXIBLES POUR FLUIDES MEDICAUX BASSE PRESSION

TUYAU HAUT DE GAMME DUREE DE VIE 10 ANS

Dispositif médical actif de classe IIa.
Conformes à la norme EN ISO 5359 : 2008.

Les flexibles d'alimentation servent de rallonges et permettent d'alimenter des appareils en gaz médicaux à partir d'une prise normalisée.

- ▶ Tuyau en PVC antistatique composé de 4 couches, extra-souples avec renforcement et fibre polyester haute résistance.
- ▶ Sans odeur.
- ▶ D'un aspect brillant et lisse pour une facilité d'entretien.
- ▶ Grande résistance à l'écrasement.
- ▶ Livrés en standard avec un embout équerre et un embout droit AFNOR sertis.
- ▶ Date de péremption indiquée au moyen d'un pictogramme sur l'embout équerre; date plus facile à visualiser.
- ▶ Disponible en O₂, AIR médical et N₂O.

Longueurs	O ₂	AIR médical	N ₂ O
1 m	OT14979	OT14993	OT15007
1,5 m	OT14980	OT14994	OT15008
2 m	OT14981	OT14995	OT15009
3 m	OT14983	OT14997	OT15011
4 m	OT14985	OT14999	OT15013
5 m	OT14987	OT15001	OT15015
7 m	OT14991	OT15005	OT17084

Disponibles sur demande:

- dans d'autres longueurs;
- avec 2 embouts équerre ou 2 embouts droits sertis.



Tuyaux antistatiques

Tuyaux antistatiques 6x12 mm

Conditionnement: rouleaux de 40 m

Tuyaux en PVC antistatique composé de 4 couches, extra-souples avec renforcement et fibre polyester haute résistance.

OT14958 : O₂

OT14957 : AIR médical

OT14964 : N₂O

OT14961 : O₂/N₂O

Commande minimum = 40 m par référence





Embouts directs AFNOR

OT10083 : Embout direct AFNOR O₂ 12x100 M

OT10089 : Embout direct AFNOR AIR médical
12x100 M

Embouts porte-tuyau AFNOR

(Livrés avec cape de sertissage)

OT10122 : Embout droit O₂

OT10108 : Embout droit AIR médical

OT10110 : Embout droit N₂O

OT10132 : Embout droit N₂O / O₂

OT10118 : Embout équerre O₂

OT10122 : Embout équerre AIR médical

OT10120 : Embout équerre N₂O

OT10134 : Embout équerre N₂O / O₂



Embouts porte-tuyau AFNOR, équerre, 7 bar, AIR médical

(Livrés avec cape de sertissage)

a OT17185 : Norme NF S 90-119: 2007

b OT10123 : Norme NF S 90-116: 1988 (tige longue)

Montages au rail AFNOR

Montage au rail complet pour O₂ ou AIR médical, avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique, curseur en métal et griffe au rail en polycarbonate.

a OT16667 : Montage au rail O₂

b OT16672 : Montage au rail AIR médical



Tous nos embouts sont conformes à la norme NF S 90-116.



Prises normalisées AFNOR 3/8G M

Conformes à la norme NF S 90-116: 1988

- OT10029 : Prise rapide O₂
- OT10031 : Prise rapide AIR médical
- OT10030 : Prise rapide N₂O

DEDOUBLEURS DE PRISES AFNOR BLOCS PRISES AFNOR

Pour alimenter plusieurs dispositifs à partir d'une seule source de gaz :

Dédoublers de prises Y avec embout direct AFNOR

- a** OT10018 : Dédouleur de prises O₂
- b** OT10019 : Dédouleur de prises AIR médical



Blocs prises au rail

Livrés avec montage au rail complet avec embout équerre AFNOR sert, 1,5 m de tuyau antistatique et attache universelle en métal.



- Bloc prise simple
 - OT15522 : O₂
 - OT15524 : vAIR médical
 - OT15525 : N₂O
- Bloc prise double
 - OT15526 O₂
 - OT15535 AIR médical
 - OT15536 N₂O
- Bloc prise triple
 - OT15537 O₂
 - OT15539 AIR médical
 - OT15540 N₂O

Soufflette

Utilisée pour le séchage des instruments chirurgicaux en cours de nettoyage et de désinfection. Se connecte à une prise normalisée AFNOR d'AIR médical. Livrée avec 3 m de tuyau.

OT15522

