

Loupes Binoculaires

DES GROSSISSEMENTS PLUS ELEVES ET DES IMAGES AUX
CONTOURS NETS AVEC ECLAIRAGE PERFORMANT PAR LED

Les loupes binoculaires HEINE constituent la référence en matière de design, de matériaux high-tech et de processus de production. Elles offrent une excellente qualité d'image, une netteté de contours unique et un large champ de vision.

Le choix peut être opéré entre divers grossissements (2x à 6x), distances de travail, variantes de supports (monture de lunettes S-FRAME, bandeau Lightweight et bandeau Professional L) et systèmes d'éclairage. La loupe peut, par exemple, être combinée avec la LED LoupeLight permettant l'éclairage des cavités creuses, de manière homogène et sans ombre, jusqu'au fond. La technique de LED la plus moderne dans un design de haute qualité !


Les loupes binoculaires peuvent être utilisées dans un grand nombre de domaines spécialisés. Par exemple, médecine générale, dermatologie, petite et grande chirurgie, chirurgie plastique, neurochirurgie, O.R.L, ophtalmologie, médecine vétérinaire, dentaire et autres.



HEINE Introduction Loupes Binoculaires

Définitions :

- Distance de travail (x)
La distance à laquelle l'image de la loupe est mise au point avec
- précision. Profondeur de champ (y)
La zone dans laquelle l'image reste mise au point avec précision
- Champ de vision (z)
Le diamètre du cercle, qui peut être vu avec le grossissement donné à la distance nominale de travail donné.

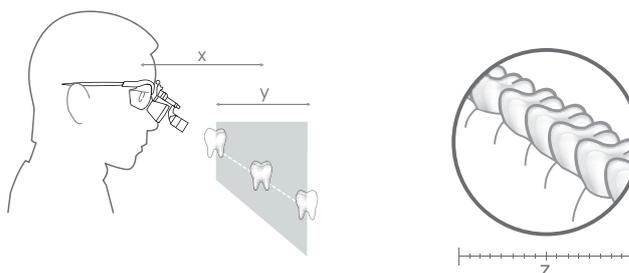

Comment choisir la bonne loupe :

Sélectionnez le grossissement

Choisissez le grossissement le plus petit qui remplit les conditions voulues. Plus le grossissement est petit et plus le champ de vision est étendu et la loupe en sera d'autant plus facile à utiliser.

Sélectionnez l'optique

HR : Optiques achromatiques à haute résolution avec des caractéristiques exceptionnelles.

HRP : Optiques à prisme à haute résolution avec des caractéristiques optiques exceptionnelles pour les grossissements de 3,5 et plus.

HR-C : Des optiques compactes et légères aux excellentes caractéristiques optiques.

C : La variante économique.

Sélectionnez la distance de travail nominale

Il s'agit d'une valeur individuelle qui dépend de la taille de l'utilisateur et de la position de travail. Plus la distance de travail est grande, plus le champ de vision est grand.

Sélectionnez les options de montage

Monture de type lunettes ou bandeau.

Sélectionnez l'illumination

Une lumière claire coaxiale est particulièrement importante lors de l'utilisation de loupes.

Loupes Binoculaires HEINE

	HR	HRP	HR-C	C
Grossissement				
2x	<input type="checkbox"/>			
2.3x				<input type="checkbox"/>
2.5x	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3.5x		<input type="checkbox"/>		
4x		<input type="checkbox"/>		
6x		<input type="checkbox"/>		
Distance de travail				
250 mm (avec bonnettes)	<input type="checkbox"/>	--	--	--
340 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
450 mm	--	--	--	<input type="checkbox"/>
520 mm	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Options de montage				
Monture S-FRAME				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Bandeau léger "Lightweight"				
	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bandeau professionnel "Professional L"				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Monture métallique légère				
	--	--	--	<input type="checkbox"/>
Accessoires				
Bonnettes pour loupes*	<input type="checkbox"/> (pour 340mm)	--	--	--
Lentilles de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
LED LoupeLight (Pages 139/140)				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Caractéristiques				
Fonction i-View**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Modulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Resistant à l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Optiques achromatiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Monture de correction (en option)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
pages	128-131	132-133	134	135

* Avec les bonnettes, la distance de travail des loupes binoculaires HR 2x/340mm et HR 2,5x/340mm se réduit à 250mm.

** **Fonction i-View:** Permet tous les angles de vue et la loupe peut être basculée vers le haut, tout en gardant l'éclairage dans le champ de vision.

Loupes Binoculaires HEINE® HR 2x

avec support de loupe pivotant HEINE® i-View



HR 2x Optique avec i-View

- ∴ Optiques achromatiques pour des images contrastées et claires avec des corrections de couleurs.
- ∴ Extrêmement légères (51 g).
- ∴ Étanche à l'eau.
- ∴ Réglage individualisé à gauche et à droite pour une mise au point parfaite de la distance interpupillaire.
- ∴ Grand champ de vision et grande profondeur de champ.
- ∴ Support de loupe pivotant i-View. Il permet tous les angles de vue et la loupe, peut être basculée vers le haut, tout en gardant l'éclairage optionnel de la LED LoupeLight dans le champ de vision.

HR 2x Spécifications techniques

Distance de travail en mm	340	420	520
Champ de vision en mm	130	190	250
Profondeur de champ en mm	130	200	290

∴



En option,
monture de
correction clip-in

Options de montage:

HEINE S-FRAME®

- ∴ Un grand confort grâce à un design moderne et ergonomique.
- ∴ Les branches ajustables et les appuis sur le nez peuvent être ajustés individuellement à chaque forme de tête ou de visage de manière parfaite. Des matériaux innovants – le carbone kinesium – réduit le poids (24g). Des verres de protection résistants en polycarbonate.
- ∴ Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.



Bandeau
Professional L
avec S-GUARD

HEINE® Bandeau Professional L® avec S-GUARD®

- ∴ Lunettes de protection S-GUARD.
- ∴ Appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées.
- ∴ Entièrement réglable en hauteur et en largeur – adaptable à chaque forme de tête. Coussinets en cuir hygiéniques et confortables.
- ∴ Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.



Bandeau
Professional L
sans S-GUARD

HEINE® Bandeau Professional L sans S-GUARD®

- ∴ Optimal pour les porteurs de lunettes qui travaillent avec leurs propres verres correcteurs.
- ∴ Appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées.
- ∴ Entièrement réglable en hauteur et en largeur – adaptable à chaque forme de tête. Coussinets en cuir hygiéniques et confortables.



Loupes Binoculaires HEINE® HR 2x

avec support de loupe pivotant HEINE® i-View

Ensembles HR 2x avec support de loupe pivotant i-View



Set A



Set B
avec
S-GUARD



Set C
sans
S-GUARD

Distance de travail en mm	340	420	520
Set A: Optique HR 2x avec i-View sur S-FRAME Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Cordon de maintien Liquide nettoyant pour verres Tissu de nettoyage Mallette	C00032375	C00032376	C00032377
Set B: Optique HR 2x avec i-View sur bandeau Professional L Système de protection S-GUARD Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Liquide nettoyant Tissu de nettoyage	C00032378	C00032379	C00032380
Set C (sans S-GUARD): Optique HR 2x avec i-View sur bandeau Professional L Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables	C00032878	C00032879	C00032880

Pour plus d'informations sur les accessoires et pour LED LoupeLight voir pages 137 à 140.

Loupes Binoculaires HEINE® HR 2.5x

avec support de loupe pivotant HEINE® i-View



Optique HR 2.5x avec i-View

- ⋄ Optiques achromatiques pour des images contrastées et claires avec des corrections de couleurs.
- ⋄ Extrêmement légères (51 g).
- ⋄ Étanche à l'eau.
- ⋄ Réglage individualisé à gauche et à droite pour une mise au point parfaite de la distance interpupillaire.
- ⋄ Grand champ de vision et grande profondeur de champ.
- ⋄ Support de loupe pivotant i-View. Il permet tous les angles de vue et la loupe peut être basculée vers le haut, tout en gardant l'éclairage optionnel de la LED LoupeLight dans le champ de vision.

Spécifications techniques HR 2.5x

Distance de travail en mm	340	420	520
Champ de vision en mm	90	130	180
Profondeur de champ en mm	110	180	260



En option,
monture de
correction clip-in

Options de montage:

HEINE S-FRAME®

- ⋄ Un grand confort grâce à un design moderne et ergonomique.
- ⋄ Les branches ajustables et les appuis sur le nez peuvent être ajustés individuellement à chaque forme de tête ou de visage de manière parfaite. Des matériaux innovants – le carbone kinesium – réduit le poids (24g). Des verres de protection résistants en polycarbonate.
- ⋄ Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.



Bandeau
Professional L
avec S-GUARD

HEINE® Bandeau Professional L avec S-GUARD®

- ⋄ Lunettes de protection S-GUARD.
- ⋄ Appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées.
- ⋄ Entièrement réglable en hauteur et en largeur – adaptable à chaque forme de tête. Coussinets en cuir hygiéniques et confortables.
- ⋄ Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.



Bandeau
Professional L
sans S-GUARD

HEINE® Bandeau Professional L sans S-GUARD®

- ⋄ Optimal pour les porteurs de lunettes qui travaillent avec leurs propres verres correcteurs.
- ⋄ Appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées.
- ⋄ Entièrement réglable en hauteur et en largeur – adaptable à chaque forme de tête. Coussinets en cuir hygiéniques et confortables.



Loupes Binoculaires HEINE® HR 2.5x

avec support de loupe pivotant HEINE® i-View

Ensembles HR 2.5x avec support de loupe pivotant i-View



Set A



Set B
avec
S-GUARD



Set C
sans
S-GUARD

Distance de travail en mm	340	420	520
Set A: Optique HR 2.5x avec i-View sur S-FRAME, Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Cordon de maintien Liquide nettoyant pour verres Tissu de nettoyage Mallette	C00032355	C00032356	C00032567
Set B: Optique HR 2.5x avec i-View sur bandeau Professional L Système de protection S-GUARD Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Liquide nettoyant Tissu de nettoyage	C00032365	C00032366	C00032367
Set C (sans S-GUARD): Optique HR 2.5x avec i-View sur bandeau Professional L Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables	C00032865	C00032866	C00032867

Pour plus d'informations sur les accessoires et pour LED LoupeLight voir pages 137 à 140.

Loupes Binoculaires HEINE® HRP

avec support de loupe pivotant HEINE® i-View



Optique HRP avec i-View

- ⋆ Optiques achromatiques pour des images hautes définitions sur la totalité du champ. Extrêmement légères (85 g).
- ⋆ Étanche à l'eau.
- ⋆ Réglage individualisé à gauche et à droite pour une mise au point parfaite de la distance interpupillaire.
- ⋆ D'importants grossissement : Choix entre 3,5x, 4x et 6x.
- ⋆ Support de loupe pivotant i-View. Il permet tous les angles de vue et la loupe, peut être basculée vers le haut, tout en gardant l'éclairage optionnel de la LED LoupeLight dans le champ de vision.

Spécifications techniques HRP

Distance de travail en mm	HRP 3,5x / 420	HRP 4x / 340	HRP 6x / 340
Champ de vision en mm	65	50	40
Profondeur de champ en mm	60	40	30

Options de montage:

HEINE S-FRAME®



En option, monture de correction clip-in

- ⋆ Un grand confort grâce à un design moderne et ergonomique.
- ⋆ Les branches ajustables et les appuis sur le nez peuvent être ajustés individuellement à chaque forme de tête ou de visage de manière parfaite. Des matériaux innovants – le carbone kinesium – réduit le poids (24g). Des verres de protection résistants en polycarbonate.
- ⋆ Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.

HEINE® Bandeau Professional L avec S-GUARD®



Bandeau Professional L avec S-GUARD

- ⋆ Système de protection S-GUARD.
- ⋆ Appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées.
- ⋆ Entièrement réglable en hauteur et en largeur – adaptable à chaque forme de tête. Coussinets en cuir hygiéniques et confortables.
- ⋆ Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.

HEINE® Bandeau Professional L sans S-GUARD®



Bandeau Professional L sans S-GUARD

- ⋆ Optimal pour les porteurs de lunettes qui travaillent avec leurs propres verres correcteurs.
- ⋆ Appuis sur le nez ergonomiques pour un confort maximum au cours des utilisations prolongées.
- ⋆ Entièrement réglable en hauteur et en largeur – adaptable à chaque forme de tête. Coussinets en cuir hygiéniques et confortables.



Loupes Binoculaires HEINE® HRP

avec support de loupe pivotant HEINE® i-View



Set A



Set B
avec
S-GUARD



Set C
sans
S-GUARD

Ensembles HRP avec i-View

Distance de travail en mm	HRP 3.5x/420	HRP 4x/340	HRP 6x/340
Set A: Optique HRP avec i-View sur S-FRAME Système de protection S-GUARD Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Liquide nettoyant Tissu de nettoyage Mallette	C00032430	C00032431	C00032432
Set B: Optique HRP avec i-View sur bandeau Professional L Système de protection S-GUARD Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Liquide nettoyant Tissu de nettoyage	C00032440	C00032441	C00032442
Set C (sans S-GUARD): Optique HRP avec i-View sur bandeau Professional L Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables	C00032840	C00032841	C00032842

Pour plus d'informations sur les accessoires et pour LED LoupeLight voir pages 137 à 140.

Loupes Binoculaires HEINE® HR-C 2.5x

avec support de loupe rigide

Optique HR-C 2.5x



- ∴ Des optiques multicouche antireflet pour des images contrastées et claires. Super compacte et extrêmement léger (17g).
- ∴ Étanche à l'eau.
- ∴ Réglage individualisé à gauche et à droite pour une mise au point parfaite de la distance interpupillaire.

Spécifications techniques HR-C 2.5x

Distance de travail en mm	340	420
Champ de vision en mm	60	70
Profondeur de champ en mm	110	140

Options de montage:

HEINE S-FRAME®



En option,
monture de
correction clip-in

- ∴ Un grand confort grâce à un design moderne et ergonomique.
- ∴ Les branches ajustables et les appuis sur le nez peuvent être ajustés individuellement à chaque forme de tête ou de visage de manière parfaite. Des matériaux innovants – le carbone kinesium
- ∴ réduit le poids (24g). Des verres de protection résistants en polycarbonate.

Avec l'option 'clip-in', monture de correction pour verres correcteurs.

Bandeau léger HEINE disponible en option. Pour les informations relatives à la commande, voir page 137.



Ensemble HR-C 2.5x avec support de loupe rigide

Distance de travail en mm	340	420
Optique HR-C 2.5x	C00032290	C00032291
S-FRAME		
2 Leviers stérilisables		
Cordon de maintien		
Liquide nettoyant		
Tissu de nettoyage		
Mallette		

Pour plus d'informations sur les accessoires et pour LED LoupeLight voir pages 137 à 140.

Loupes binoculaires HEINE® C 2.3

La loupe binoculaire économique pour une meilleure vision

Idéale pour les travaux de laboratoires et pour la médecine générale.



C 2.3

- ⋄ Images claires et précises. Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche, résistantes aux rayures produisent des images claires et précises.
- ⋄ Flexibilité pour un ajustage précis. Réglage indépendant de l'écart interpupillaire, pour un alignement précis des optiques.
- ⋄ Confortables et très légères – 46 g seulement. Branches crochet souples et enveloppantes, pour s'adapter au mieux à l'anatomie de l'utilisateur. Monture métal très légère.
- ⋄ La loupe de toutes les circonstances. La conception ultra-compacte, le poids-plume et le faible coût de la loupe binoculaire C 2.3 en font la loupe de toutes les circonstances. Distance de travail. 340mm ou 450mm.
- ⋄ Egalement livrable en C 2.3K avec bandeau frontal léger.



C 2.3K

Spécifications technique	C 2.3x/340mm	C 2.3x/450mm
Grossissement	2,3x	2,3x
Distance de travail	340mm	450mm
Champ de vision Ø	110mm	130mm
Poids	46 g	46 g
Profondeur de champ	120mm	190mm

Correction de l'utilisateur en	Distance de travail C 2.3x/	Distance de travail C 2.3x/
+2	440mm	670mm
+1	390mm	560mm
0	340mm	450mm
-1	300mm	420mm
-2	270mm	370mm

Information importante pour les porteurs de lunettes:
Les loupes C 2.3K peuvent aussi s'utiliser sans lunettes. Si vous préférez travailler sans lunettes, le tableau indique l'incidence de votre « correction » sur la distance de travail.

Loupes binoculaires C 2.3 / C 2.3K	
C 2.3 / 340 Lunettes loupe avec etui	C00032039
C 2.3 / 450 Lunettes loupe avec etui	C00032202
C 2.3K / 340 Loupe binoculaire avec bandeau léger en mallette	C00032230
C 2.3K / 450 Loupe binoculaire avec bandeau léger en mallette	C00032231

Accessoires



Accessoires pour lunettes loupe C 2.3 / C 2.3K	
Etui de protection pour loupe C 2.3. et accessoires.	C00032038
Lentilles de protection détachables pour C 2.3 et C 2.3K. Protègent les oculaires des loupes et sont stérilisables.	C00032097

Loupes Binoculaires HEINE et accessoires

Informations relatives à la commande

Optiques avec support de loupe i-View pour S-FRAME en mallette

Distance de travail en mm	340mm	420mm	520mm
HR 2x	C00032555	C00032556	C00032557
HR 2.5x	C00032595	C00032596	C00032597
HRP 3.5x HRP 4x HRP 6x	C00032721 C00032722	C00032720	

Optiques avec i-View et S-GUARD pour BANDEAU PROFESSIONAL L

Distance de travail en mm	340mm	420mm	520mm
HR 2x	C00032558	C00032559	C00032560
HR 2.5x	C00032585	C00032586	C00032587
HRP 3.5x HRP 4x HRP 6x	C00032711 C00032712	C00032710	

Optiques avec i-View pour BANDEAU PROFESSIONAL L (sans S-GUARD)

Distance de travail en mm	340mm	420mm	520mm
HR 2x	C00032730	C00032731	C00032732
HR 2.5x	C00032733	C00032734	C00032735
HRP 3.5x HRP 4x HRP 6x	C00032737 C00032738	C00032736	

Optiques avec support de loupe rigide pour S-FRAME et BANDEAU LEGER LIGHTWEIGHT

Distance de travail en mm	340mm	420mm	520mm
HR-C 2.5x	C00032265	C00032266	



Accessoires pour Loupes Binoculaires HEINE

Informations relatives à la commande



Options de montage

S-FRAME

Pour les loupes binoculaires HR, HRP, HR-C, incl. cordon de maintien avec liquide nettoyant	C00032302
---	-----------

Bandeau Professional L

Pour optiques HR	C00032549
------------------	-----------

Bandeau léger Lightweight

Pour optiques HR-C avec support de loupe rigide	C00032516
---	-----------



Accessoires pour optiques

Bonnets pour loupes binoculaires

Avec les bonnettes, la distance de travail des loupes binoculaires 2x/340 mm et HR 2,5x/340 mm se réduit à 250 mm.

Pour optiques HR 2x/340mm	C00032521
Pour optiques HR 2.5x/340mm	C00032523



Lentilles de protection

Pour protéger les optiques HR et HRP

Pour loupes HR (5 paires) (01)	C00032537
Pour loupes HRP (02)	C00032027

Leviers stérilisables

Pour loupes HR et HRP avec i-View (03)	C00032551
Pour loupes HR-C avec support de loupe rigide (04)	C00032524



Mallette

Pour loupe binoculaire et accessoires ou pour toutes les ensembles avec S-FRAME	C00032552
---	-----------



Différents accessoires

Clip universel

Pour optiques HR-C avec support de loupe rigide, adaptable à toutes les montures de lunettes.	C00032518
---	-----------

Adaptateur dentaire

Pour optiques HR-C avec support de loupe rigide. Permet un angle de vue de l'ordre de 20° à 35°. Protège des douleurs de la nuque et du dos liées à une mauvaise position.	C00032528
--	-----------

Accessoires pour Loupes Binoculaires HEINE

Informations relatives à la commande



Accessoires pour S-FRAME

Cordon de maintien S-FRAME C00032305

Kit de pièces de rechange S-FRAME
avec caoutchouc latéral, pont nasal (1 pièce) et vis C00032308

Monture de correction Clip-in
pour verres correcteurs C00032309

Verres de protection, grands (lg), 1 paire (Standard) C00032306

Verres de protection, petits (sm), 1 paire C00032307

Liquide nettoyant, pack de 2 C00032542

HEINE® LED LoupeLight

LED LoupeLight compacte, idéale pour applications ORL et dentaires


LED




- Technologie LED avancée. Lumière blanche et homogène, idéale pour les applications ORL et dentaires.
- Eclairage coaxial. Eclairage sans ombre des cavités, spécialement conçu pour le domaine dentaire. Visualisation coaxiale idéale pour tous les systèmes de supports de loupes HR et HRP.
- Compact, léger (24g). Garantit un confort parfait.
- Boîtier aluminium. Compact et robuste avec isolation thermique évoluée.
- Conception étanche à l'eau. Nettoyage facile.
- Réglage individuel des angles de visualisation. Le bon angle pour chaque situation. Le filtre jaune en option réduit la lumière bleue. Préviend le durcissement trop rapide des composites.

Spécification technique

Intensité lumineuse	40000 Lux à une distance de travail de 250mm
Temp. de couleur	6250 Kelvin
Durée de vie de la LED	1 W LED pour 50000 heures d'utilisation
Réglage du Spot	La zone éclairée est déterminée en fonction des loupes HR ou HRP. 81 mm Ø pour 420mm, 95 mm Ø pour 520mm distance de travail
Angle d'inclinaison	Ajustable individuellement et en continu pour chaque examen
Temps d'utilisation	17 heures avec mPack LL

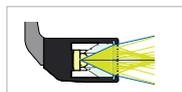

Système traditionnel (01)

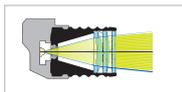

Système HEINE à lentilles de précision (02)



- Le système optique à lentilles de précision est constitué par quatre lentilles de très haute qualité. Cela permet un éclairage homogène de la totalité du visage et génère un faisceau lumineux clairement défini.

HEINE® mPack LL

Source de courant



- Liberté de mouvement sans limite, sans câbles de raccordements gênants vers la table, vers le mur ou vers les matériels d'examen.
- Une capacité triplée avec la technologie Li-ion. En pleine charge, une durée de fonctionnement jusqu'à trois fois supérieure aux systèmes classiques NiCd. Pas d'effet mémoire, une autonomie de fonctionnement de 17 heures.
- Charge Rapide. Se charge jusqu'à capacité complète en juste 2 heures.
- Indicateur de Capacité de Batterie. Vous permet de toujours savoir de quelle charge vous disposez.
- Réglage de clarté flexible. Le réglage optimal de l'intensité lumineuse réduit les reflexes.
- Diverses Options de Charge : Chargeur table et mural EN50 ou transformateur. Intelligent. En état de charge, il peut aussi être utilisé comme source de courant électrique.
- Transformateur compatible 100 - 240V muni de 4 fiches garantissant sa compatibilité dans le monde entier.

HEINE® LED LoupeLight et accessoires

Informations relatives à la commande

LED LIGHT




(01)

(02)



(03)

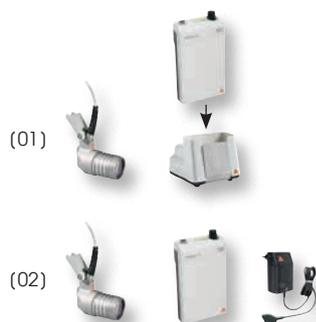

(01)

(02)

LED LoupeLight

LED LoupeLight pour loupes HR et HRP avec support de loupe i-View (01)	C00832236
LED LoupeLight pour loupes HR-C avec support de loupe rigide	C00832238

Filtre jaune (optionnel) (03)	C00832241
-------------------------------	-----------

LED Loupe Light avec source de courant

	Pour support de loupe i-View (HR / HRP)	Pour support de loupe rigide (HR-C)
LED LoupeLight avec mPack LL et EN 50 (01)	C00832381	C00832382
LED LoupeLight avec mPack LL et transformateur à fiche (02)	C00832384	C00832385



Mallettes LED LoupeLight avec Loupes Binoculaires HR

Distance de travail en mm	HR 2.5x / 340	HR 2.5x / 420	HR 2.5x / 520
Optique HR 2.5x avec i-View sur S-FRAME LED LoupeLight Filtre jaune (optionnel) mPack LL Chargeur EN 50 Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Cordon de maintien Liquide nettoyant Tissu de nettoyage Mallette	C00832355	C00832356	C00832357



Mallettes LED LoupeLight avec Loupes Binoculaires HRP

Distance de travail en mm	HRP 3.5x / 420	HRP 4x / 340	HRP 6x / 340
Optique HRP avec i-View sur S-FRAME LED LoupeLight Filtre jaune (optionnel) mPack LL Chargeur EN 50 Lentilles de protection 2 Leviers stérilisables Cordon de maintien Liquide nettoyant Tissu de nettoyage Mallette	C00832430	C00832431	C00832432