

Dermatoscopes

PLUS DE DÉTAILS POUR UN DIAGNOSTIC ENCORE AMÉLIORÉ :
POLARISATION, LEDS À HAUTE PERFORMANCE ET UNE
OPTIQUE À HAUTE RÉOLUTION.

Le nombre de nouveaux cas du Mélanome Malin continue à augmenter dans le monde entier. Le taux de mortalité par contre reste sur le même niveau. Cela est surtout dû au fait que beaucoup de pays prêtent maintenant à la prévention du cancer de la peau l'attention qu'elle mérite. Car une détection précoce du mélanome malin ouvre de bonnes chances de guérison. Les dermatoscopes de HEINE contribuent à un diagnostic de haute qualité.

Le nouveau standard s'appelle HEINE DELTA 20 Plus et aide les médecins à affiner leur diagnostic pour sauver plus de vies : L'option de travailler avec la lumière polarisée facilite la visualisation des structures cristallines et vasculaires.

Polarisation et immersion

Pour le meilleur diagnostic la méthode d'examen peut être harmonisée avec la lésion. Pour cela l'embout de contact peut être échangé et la lésion peut être examinée soit avec polarisation (sans liquide) soit avec immersion (avec liquide).

Nouveau : LED maintenant de qualité HEINE

Le dermatoscope mini 3000 LED : Le dermatoscope de poche pour l'utilisation mobile avec éclairage à LED. Apporte deux fois plus de lumière que la variante XHL Xénon Halogène conventionnelle.

Enregistrements photographiques numériques

Grâce à l'adaptateur photo HEINE SLR, il est possible d'effectuer des photographies de très brillante qualité tant dans le domaine dermatoscopique que dans le domaine clinique.


LED HD



Dermatoscope HEINE DELTA® 20 Plus



NOUVEAU LED

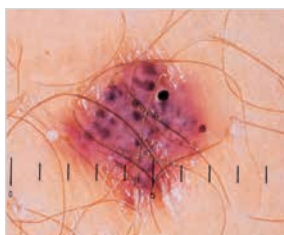

Sert à l'examen par microscopie lumineuse pour l'identification précoce de mélanomes malins. Sert aussi à l'examen des lésions non mélanocytaires, des carcinomes basocellulaires et des dermatofibromes. La surface de la peau réfracte la lumière et la reflète en partie. Pour cette raison il faut soit un liquide d'immersion entre le dermatoscope et la peau (p. ex. une huile de dermatoscopie) soit une lumière polarisée si l'on veut observer les cellules pigmentaires ou d'autres structures dans les couches cutanées plus profondes.

- Immersion et polarisation. Avec des embouts de contact différents (embout de contact N pour immersion et embout de contact P pour polarisation) l'examen peut être harmonisé avec la lésion respective, car certaines caractéristiques sont mieux visibles si l'on utilise un liquide et d'autres sous la lumière polarisée.
- 4 LEDs à haute performance produisent un éclairage absolument homogène et lumineux avec un rendu des couleurs excellent (indice de rendu des couleurs IRC > 87). Optique de précision haute résolution avec système de lentilles achromatiques. Grossissement de 10 à 16 fois, image claire, sans distorsion, champ de vision exceptionnel.
- Oculaire. Mise au point parfaite, correction de -6 à +6 dpt. Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.

Tête de Dermatoscope DELTA 20 Plus

2,5V/3,5V LED

avec embout de contact P polarisation 23 mm Ø avec échelle et précis de dermatoscopie, sans poignée

K00834212

avec embout de contact P polarisation 23 mm Ø sans échelle et dermatoscopy compendium, sans poignée

K00834213

avec embout de contact N immersion 23 mm Ø avec échelle et précis de dermatoscopie, sans poignée

K00834214

avec embout de contact N immersion 23 mm Ø sans échelle et précis de dermatoscopie, without handle

K00834215

Tête de Dermatoscope DELTA 20 Plus sans embout de contact

K00834210

Dermatoscope HEINE DELTA® 20 Plus



NOUVEAU LED

Trousse complète avec: Dermatoscope DELTA 20 Plus avec embout de contact polarisation P 23 mm Ø avec échelle précis de dermatoscopie étui rigide



Trousses DELTA 20 Plus P pour polarisation	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
poignée à piles BETA	K25810118		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		K25820376	K25827376
poignée rechargeable BETA NT et chargeur NT300		K25820420	
Poignée rechargeable BETA L et chargeur NT300			K25829420

Trousse complète avec: Dermatoscope DELTA 20 Plus avec embout de contact immersion N 23 mm Ø avec échelle 10ml d'huile de dermatoscopie, précis de dermatoscopie étui rigide



Trousses DELTA 20 Plus N pour immersion	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
poignée à piles BETA	K25710118		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		K25720376	K25727376
poignée rechargeable BETA NT et chargeur NT300		K25720420	
Poignée rechargeable BETA L et chargeur NT300			K25729420

Trousse complète avec: Dermatoscope DELTA 20 Plus avec embout de contact polarisation P 23 mm Ø avec échelle avec embout de contact immersion N 23 mm Ø avec échelle précis de dermatoscopie étui rigide



Trousses DELTA 20 Plus (polarisation +)	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
Trousse C: poignée à piles BETA	K26010118		
Trousse B: BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		K26020376	
Trousse A: Poignée rechargeable BETA L et chargeur NT 300 et petit embout de contact, 8mm			K25929420

: Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Dermatoscope HEINE DELTA® 20

Dermatoscope avec éclairage LED, proche de la lumière du jour

LED HQ



- Optique de précision haute résolution avec système de lentilles achromatiques. Grossissement 10x, image claire, sans distorsion de la zone examinée, champ de vision exceptionnel.
- Eclairage LED, proche de la lumière du jour. Eclairage par 6 LED, alternativement éclairage latéral par 3 LED pour un meilleur contraste, d'une durée de vie pratiquement illimitée.
- Oculaire. Mise au point parfaite, correction de -6 à +6 dpt.
- Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.
- Photographie numérique avec adaptateur photo SLR pour appareil photographique reflex numérique.



Dermatoscope DELTA 20	2,5V/3,5V LED
avec précis de dermatoscopie, embout de contact 23mm Ø avec échelle, sans poignée	K00834201
idem, sans échelle, sans poignée	K00834207
Dermatoscope DELTA 20 sans embout de contact	K00834202

Trousse complète avec: Dermatoscope DELTA 20 embout de contact 23mm Ø avec échelle
10ml d'huile de dermatoscopie,
précis de dermatoscopie
étui rigide



Trousses DELTA 20	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
poignée à piles BETA	K25610118		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		K25620376	K25627376
BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche		K25620384	K25627384
poignée rechargeable BETA NT et chargeur NT 300		K25620420	
Poignée rechargeable BETA L et chargeur NT 300			K25629420

: Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.


Accessoires

pour Dermatoscope DELTA 20 Plus et Dermatoscope DELTA 20



Embout de contact pour DELTA 20 Plus

Polarisation (P) 23mm Ø, avec graduation (01)	K00034212
Polarisation (P) 23mm Ø, sans graduation (01)	K00034213
Immersion (N) 23mm Ø, avec graduation (02)	K00034214
Immersion (N) 23mm Ø, sans graduation (02)	K00034215
Petit embout de contact, 8mm Ø (02) pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K00034205

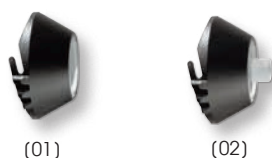

Embout de contact pour DELTA 20

23mm Ø, sans graduation (01)	K00034203
23mm Ø, avec graduation (01)	K00034204
Petit embout de contact, 8mm Ø (02) pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K00034205



Huile de dermatoscopie

en boîte de 6 (6 x 10ml), rend les couches externes de l'épiderme transparentes pendant l'examen	K00034005
--	-----------



Adaptateur Photo SLR

pour dermatoscope / appareil photo numérique SLR, avec optique. Grand champ de vision, image très nette

Adaptateur photo SLR pour Canon	K00034185
idem, pour Nikon	K00034186
idem, pour Olympus	K00034187



Câble de liaison

(1,3m) entre poignée et DELTA 20	X00099231
----------------------------------	-----------



Etui Ceinture BETA

pour poignée BETA	X00099008
-------------------	-----------



Trousse d'accessoires photo

comprenant Adaptateur Photo SLR, câble de liaison, bague de distance et Etui Ceinture BETA

Trousse d'accessoires photo pour Canon	K00034190
idem, pour Nikon	K00034191
idem, pour Olympus	K00034192

Dermatoscope HEINE mini3000®

Dermatoscope en format de poche



Dermatoscope de poche moderne, avec un design compact et une optique de haute qualité. Grossissement 10x, avec mise au point de l'optique. Système de verrouillage par rotation. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000. Poignée livrable en noir ou bleu.

- ✦ Ampoules XHL Xénon. Lumière brillante concentrée pour une illumination uniforme avec un excellent rendu des couleurs.
- ✦ 20.000 cycles marche / arrêt garantis.
- ✦ Optique achromatique de haute qualité neutre au niveau des couleurs fournit des images nettes et sans distorsions avec un grossissement de 10 fois.
- ✦ Choix de différents embouts de contact pour l'examen : Embouts de contact avec et sans graduation, peuvent être autoclavés.
- ✦ Petit embout de contact spécial pour l'examen des lésions difficiles d'accès. Précis d'utilisation détaillé.
- ✦ Piles échangeables de type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option*.
- ✦ Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête. Pas d'entretien. Poignée utilisable pour d'autres têtes.
- ✦ Design primé. Qualité maximale avec dimensions minimales.

Dermatoscope mini3000	2,5V
avec embout de contact, poignée à piles mini3000 et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles	D00178107
avec embout de contact avec graduation, poignée à piles mini3000 et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles	D00178109
avec embout de contact, avec ampoule, sans poignée	D00178106
avec embout de contact avec graduation, avec ampoule, sans poignée	D00178108



Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X00188109
--	---------------------------

*Afin de modifier l'instrument en version rechargeable avec le chargeur mini NT, voir page 158.

Dermatoscope LED HEINE mini 3000® à LED

Avec éclairage LED de qualité HEINE HQ



NOUVEAU LED HQ



Caractéristiques techniques identiques à mini 3000 dermatoscope mais :

- ⌘ Ne demande pas d'entretien, pas besoin d'échanger les ampoules.
- ⌘ Gestion thermique des LEDs pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- ⌘ LED à haute performance : éclairage lumineux et absolument homogène avec un excellent rendu des couleurs – température de couleur 4000 K , indice de rendu des couleurs > 95.
- ⌘ 100% plus de lumière en comparaison avec les instruments à éclairage XHL Xénon Halogène.
- ⌘ Indicateur de performance : L'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie.

La fonction de diminution progressive de la luminosité signale que les

- ⌘ batteries devront bientôt être échangées ou rechargées.

Durée d'autonomie jusqu'à 10 heures. Moins d'échanges de batteries, durée de vie prolongée des accus.

Dermatoscope LED mini 3000	2,5V
avec embout de contact, poignée à piles mini 3000 et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles	D00878107
avec embout de contact avec graduation, poignée à piles mini 3000 et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles	D00878109
avec embout de contact, avec ampoule, sans poignée	D00878106
avec embout de contact avec graduation, avec ampoule, sans poignée	D00878108



Set complet avec : Dermatoscope mini 3000 LED
avec embout de contact sans graduation, 10ml huile de dermatoscopie, Etui à fermeture éclair

Trousses Dermatoscope LED mini 3000	2,5V
mini 3000 poignée à piles, piles incluses	D88778021



*Afin de modifier l'instrument en version rechargeable avec le chargeur mini NT, voir page 158.

Accessoires

pour Dermatoscopes LED mini 3000 et Dermatoscopes mini 3000



(01)



(02)

Embout de contact

sans graduation (01)	D00078116
----------------------	-----------

avec graduation (01)	D00078117
----------------------	-----------

Petit embout de contact, 8mm Ø (02) pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K00034008
---	-----------



(03)

Huile de dermatoscopie

en boîte de 6 (6x 10ml), rend les couches externes de l'épiderme transparentes pendant l'examen (03)	K00034005
--	-----------