

# Tensiomètres


TENSIOMETRES ANTICHOC ET SANS LATEX.


La génération innovante de tensiomètres HEINE GAMMA G sans latex, représente le standard de performance, de précision et offre un rapport qualité/prix optimal. Conception actuelle et fonctionnelle, alliant un manomètre de précision à une construction robuste, garantie de résultats fiables pour de nombreuses années dans la clinique, l'hôpital ou le cabinet.



Validation des tensiomètres GAMMA G

En conformité avec le protocole de l'Union Européenne, les tensiomètres HEINE GAMMA G bénéficient de la validation clinique accordée par la Société Européenne de lutte contre l'Hypertension (E.S.H.). Cette publication scientifique a confirmé la précision constante des appareils de mesure de tension artérielle GAMMA G pour les valeurs systoliques et diastoliques.

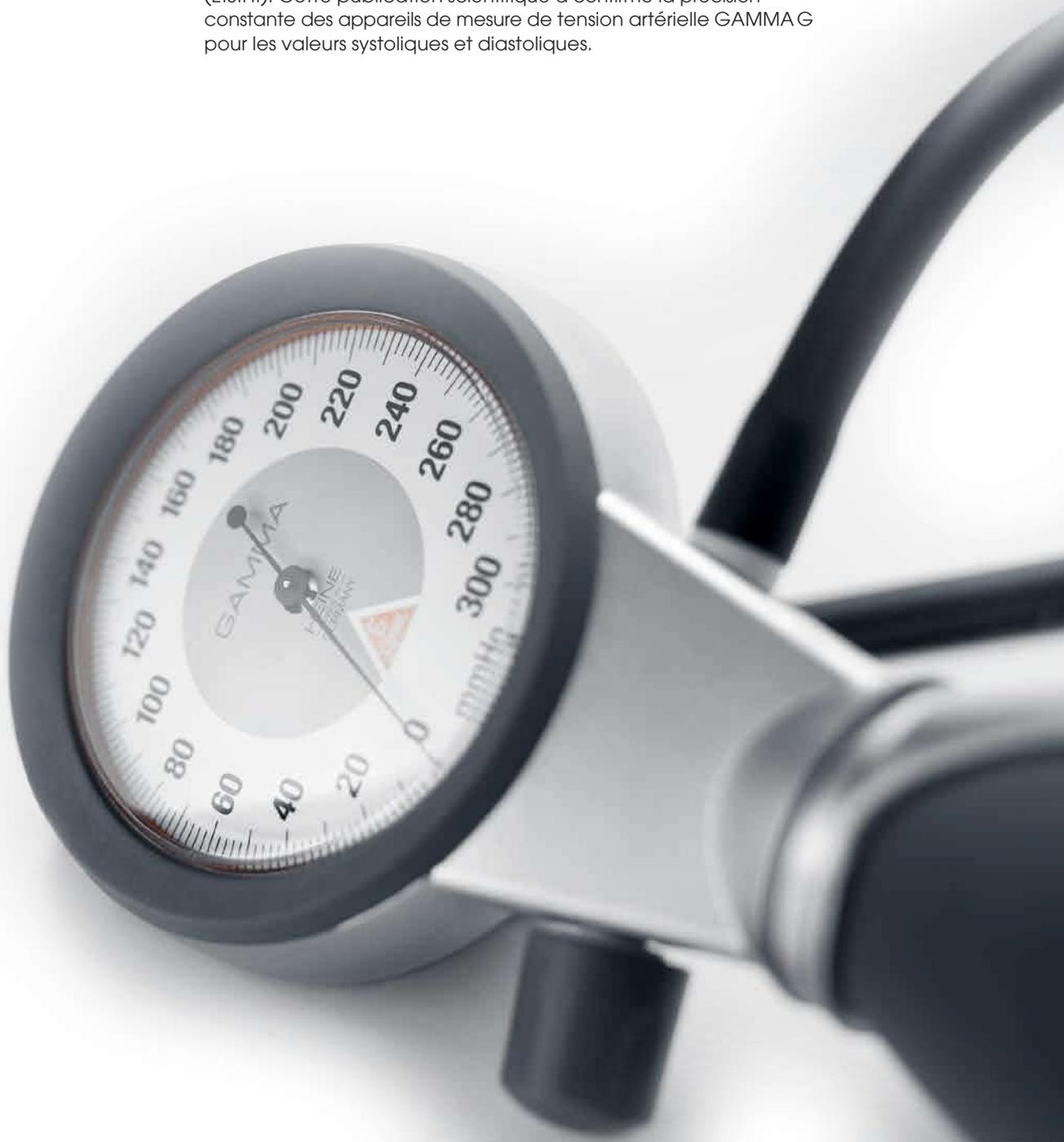

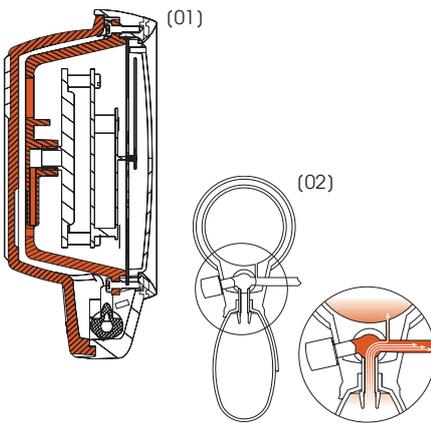

**SHOCKPROOF**

(01) Construction du boîtier à double paroi, montage antichoc du manomètre. Les tensiomètres de la série GAMMA G sont construits solidement, avec un système d'absorption des chocs très élaboré qui protège le manomètre et assure aux instruments une longévité inégalée. Les tensiomètres de la série GAMMA G sont testés bien au-delà des normes de conformité (EN 1060) pour la communauté Européenne ou (SP9) pour les Etats-Unis.

**SYSTÈME DE REPARTITION DE PRESSION**

(02) Conception monotube avec système de répartition de pression. Le système exclusif de répartition de pression contrôle l'arrivée d'air au manomètre pendant le gonflage, pour donner une montée en pression douce et précise qui augmente la longévité du manomètre. Grâce à cette innovation, la Série HEINE GAMMA G offre maintenant une caractéristique de longévité, réservée jusqu'alors aux seuls systèmes « double tube », sous une forme monotube pratique.

**HEINE GAMMA® G7**

Le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium



- ∴ Antichoc.
- ∴ Sans latex.
- ∴ Système de régulation de pression.
- ∴ Manomètre protégé des surpressions. Longévité et fiabilité.
- ∴ Microfiltre protège la valve et le manomètre.
- ∴ Cadran grand diamètre. Facile à lire noir sur blanc 56mm Ø.
- ∴ Aiguille de grande qualité. Calibrage précis, résistante et antichoc.
- ∴ Grande poire de gonflage. 50% de volume en plus pour le gonflage rapide du brassard.
- ∴ Valve d'échappement d'air exclusive. Permet un réglage précis et fiable de l'échappement, décompression rapide, grande longévité. Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.
- ∴ Dessus du boîtier en alliage d'aluminium et thermoplastiques (TP Elastomère) avec une bague absorbant les chocs pour protéger l'aiguille et le verre.
- ∴ Dessous du boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques (Poliamide / TP Elastomère) avec en plus d'un absorbeur de chocs, un traitement antidérapant.
- ∴ Cuillère réglable en alliage léger. Pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.
- ∴ Brassard monotube de grande qualité, avec fermeture Velcro. Lavable.
- ∴ Design ergonomique. Le G7 est le compromis parfait entre le confort et la facilité d'utilisation.
- ∴ 10 ans de Garantie.\*

Contre tout défaut de fabrication et d'usage pendant une période de 10 ans à partir de la date d'achat.

GAMMA G7	
complet avec brassard adulte dans un étui à fermeture éclair	M00009232
complet avec brassard enfant dans un étui à fermeture éclair	M00009233
Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte dans un étui à fermeture éclair	M00009554
complet avec brassard adulte sans étui à fermeture éclair, emballage de 10 pièces	M00009560

## HEINE GAMMA® G5

### Le tensiomètre HEINE standard



Mêmes caractéristiques que GAMMA G7, sauf :

- ∴ Boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques (Polyamide /TP Elastomère), avec en plus d'un absorbeur de chocs, un traitement antidérapant.
- ∴ Cuillère réglable (Polyamide Thermoplastique). Pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.
- ∴ 5 ans de Garantie.\*

\*contre tout défaut de fabrication et d'usage pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat.

#### GAMMA G5

complet avec brassard adulte dans un étui à fermeture éclair	M00009230
complet avec brassard enfant dans un étui à fermeture éclair	M00009231
Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte dans un étui à fermeture éclair	M00009555
complet avec brassard adulte sans étui à fermeture éclair, emballage de 10 pièces	M00009561

## HEINE GAMMA® GP

### Modèle avec valve presse-bouton innovante



Mêmes caractéristiques techniques que GAMMA G5 mis à part la valve presse-bouton.

- ∴ Le système exclusif de distribution de pression confère une montée en pression douce et sûre, et assure une grande longévité au manomètre. Facile à utiliser indifféremment par les droitiers ou les gauchers.
- ∴ 5 ans de Garantie.\*

\*contre tout défaut de fabrication et d'usage pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat.

#### GAMMA GP

complet avec brassard adulte dans un étui à fermeture éclair	M00009242
complet avec brassard enfant dans un étui à fermeture éclair	M00009243
Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte dans un étui à fermeture éclair	M00009556
complet avec brassard adulte sans étui à fermeture éclair, emballage de 10 pièces	M00009562

## HEINE GAMMA® XXL LF

### Le modèle professionnel polyvalent



(01)

Comme le GAMMA XXL LF ne contient pas de mercure, il est à la fois sans risque et écologique.

- ∴ Sans latex.
- ∴ Construction robuste en polycarbonate. Pour résister aux sollicitations les plus exigeantes en cabinet ou à l'hôpital.
- ∴ Cadran de grande dimension (Ø 130mm). Orientable pour une lecture facile, sous n'importe quel angle.
- ∴ Aiguille précise de haute qualité. Pour une indication exacte, stable et juste. Valve de précision en métal. Facile à doser.
- ∴ Tube de gonflage spiralé (3m) donnant une plus grande distance de travail.
- ∴ Sans mercure.
- ∴ Valve d'échappement d'air de précision.
- ∴ Fixations : Murale, sur table, sur rail ou sur pied à roulettes (réglable en hauteur). 10 ans de Garantie.\*

Contre tout défaut de fabrication et d'usage pendant une période de 10 ans à partir de la date d'achat.

#### GAMMAXXL LF

GAMMA XXL LF-W Modèle mural (01)	M00009323
GAMMA XXL LF-S Modèle sur pied à roulettes (02)	M00009326
GAMMA XXL LF-R Modèle sur rail (03)	M00009325
GAMMA XXL LF-T Modèle de table (tube non-spiralé) (04)	M00009322



(03)



(04)



(02)

#### Accessoires

Support brassard pour GAMMA XXL LF-T	M00009141
Support de table pour GAMMA XXL LF-T	M00009142
Pied à roulettes réglable pour GAMMA XXL LF-S	M00009145
Plaque de montage universelle pour GAMMA XXL LF-R, -S, -W	M00009306
Pince de rail pour GAMMA XXL LF-R	M00009307


## Brassards de tensiomètres et accessoires


### Brassards de tensiomètres sans latex

Brassards pour tensiomètres GAMMA G7/G5/GP/XXL LF.



- ∴ Sans latex.
- ∴ S'adaptent à la plupart des tensiomètres les plus couramment utilisés.
- ∴ Brassards velcro de grande qualité, réalisés dans une matière résistante à l'usage, physiologiquement testée.
- ∴ Double couture.
- ∴ Lavable.
- ∴ Index de bon positionnement.
- ∴ Indication claire de la taille et marque de contrôle de la circonférence du bras. Tube très épais, hautement flexible pour une grande longévité.
- ∴ Fiabilité prouvée, système absolument étanche.

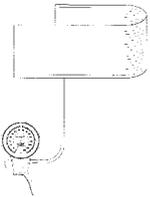	GAMMA G7/G5/GP	Brassards monotube, complet Taille			Poches monotube Taille		Enveloppes Taille	
		Taille	Circonférence / cm	Code	Taille	Code	Taille	Code
	Petit, enfant	6x28	8-13	M00009700	5 x 15	M00009661	6 x 28	M00009059
	Enfant	10x34	13-20	M00009702	8 x 20	M00009663	10 x 34	M00009060
	Petit, adulte	14x53	20-29	M00009704	11 x 23	M00009664	14 x 53	M00009061
	Adulte	14x58	29-41	M00009619	12 x 28	M00009665	14 x 58	M00009055
	Grand, adulte	20x86	>41	M00009615	18 x 52	M00009667	20 x 86	M00009057

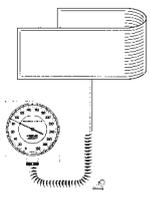	GAMMA XXL LF	Brassards 2 tubes, complet Taille Circonférence / cm			Poches 2 tubes Taille		Enveloppes Taille	
		Taille	Circonférence / cm	Code	Taille	Code	Taille	Code
	Petit, enfant	6x28	8-13	M00009701	5 x 15	M00009671	6 x 28	M00009059
	Enfant	10x34	13-20	M00009703	8 x 20	M00009673	10 x 34	M00009060
	Petit, adulte	14x53	20-29	M00009705	11 x 23	M00009674	14 x 53	M00009061
	Adulte	14x58	29-41	M00009629	12 x 28	M00009675	14 x 58	M00009055
	Grand, adulte	20x86	>41	M00009625	18 x 52	M00009677	20 x 86	M00009057